

FlexiBlink

Varenr. 1573
HMS-nr.: 231017

Sengevakt

SENG10



Brukerhåndbok

Dok. nr.: 2454 A2
Dato: 2018.10.29

Innholdsfortegnelse

1. Innledning	3
2. Oversikt	4
Utvendig	4
Under lokket	4
Batteriet	4
Batterieliminatort	5
3. Komme i gang	5
Still inn Huskoden	5
Velg funksjon (ID-velger)	5
Montering	5
Sette inn batteriet	6
4. I bruk	6
5. Viktig informasjon	6
Resirkulering	6
6. Tekniske data	7
7. Sikkerhet	7
8. Samsvarserklæring	7
9. ID-tabellen – velg varslingsstype	7
10. Feilsøking	8

1. Innledning

Sengevakt SENG10 er et produkt i FlexiBlink-serien. Sengevakten viderevarsler til FlexiBlink mottakere.

Sengevakt SENG10 benyttes sammen med en senge- eller stolsensor for å varsle aktivitet hos bruker. Sengevakten kan viderevarsle når bruker går ut av senga eller har et lengre fravær fra seng. Sengevakten kan også gi talepåminnelser til brukeren om natten.


SENG10 benytter vanligvis batterieliminatør og et spesialbatteri. Spesialbatteriet vil fungere som en backup ved et eventuelt strømbrudd. Selv om en ikke monterer batterieleiminatør, vil spesialbatteriet gi flere års levetid selv ved daglig bruk.

Dersom en kun ønsker alarmer i spesielle tidsperioder på døgnet, kan en bruke en timer på batterieliminatoren. I disse tilfeller skal ikke batteriet kobles til.




2. Oversikt

Utvendig

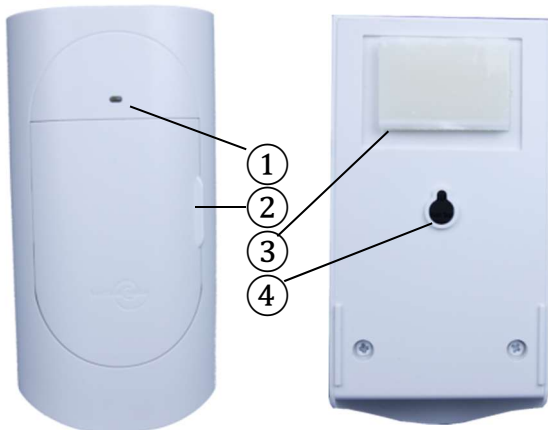

Figur 1 Forside


Figur 2 Bakside

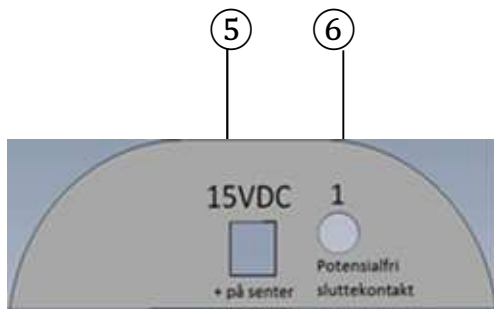

Figur 3 Bunn med 3,5mm jack-tilkobling

- ① Lysindikator
- ② Lokk
- ③ Borrelås-tape
- ④ Hull for skruefeste
- ⑤ Tilkobling for batterieliminatortilkobling 15VDC
- ⑥ Signalingang for FlexiBlink sensorer og potensialfrie brytere. (Sammenkobling av lederne gir signal.)

Under lokket

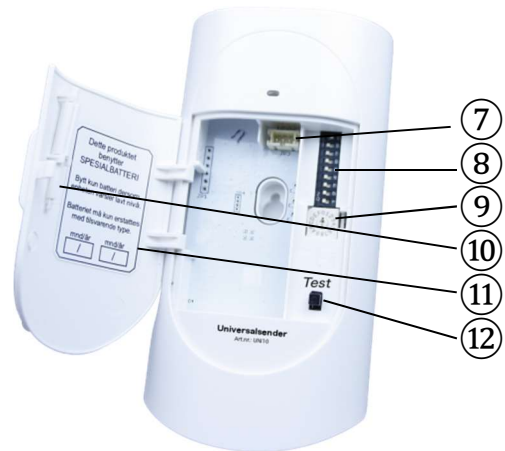

Figur 4 Under lokket

- ⑦ Batterikontakt
- ⑧ Huskodevelger (kanal)
- ⑨ Funksjonsvelger (ID-velger)
- ⑩ Verktøy for innstillinger
- ⑪ Batteriinformasjon
- ⑫ Testknapp

Batteriet

Det følger med et høykapasitets litium-batteri (Varenr. 9100100934), som virker som nødstrømbatteri ved bruk av batterieliminatoren. Batteriet må ikke lades opp.



Batterieliminatør

Den medfølgende batterieliminatøren kan benyttes for å unngå å tappe batteriet unødig.

Dersom SENG10 skal tidsstyres (på/av til faste tider i døgnet), benyttes en timer mellom kontakten i vegg og batterieliminatøren. Da må IKKE batteriet settes inn!

Batterieliminatøren kobles inn i spenningsinngangen ⑤ i bunnen av SENG10.

3. Komme i gang

Still inn Huskoden

Alle FlexiBlink varslingsprodukter som du har i boligen må stilles inn med lik Huskode. Skyv knappene i Huskodevelgeren til et tilfeldig valgt mønster. Benytt gjerne det medfølgende verktøyet som sitter i lokket.



Huskodevelger
(fabrikkinnstilling)

Velg funksjon (ID-velger)

SENG10 kan varsle flere forskjellige typer hendelser og ha tidsforsinkelse. Vri på Funksjonsvelgeren til den posisjonen som passer til det som skal varsles i mottakerne. Benytt gjerne den korte enden på det



Funksjonsvelger
(fabrikkinnstilling)

medfølgende verktøyet som sitter i lokket.

Se tabellen på side 7 for valg av riktig ID. ID E-F er satt av til bruk med FlexiApp (Krever installasjon av en AppSender i boligen) og IRIS Touch. Angitt ID sender en PÅ-melding når signalet oppfattes, og en AV-melding når signalet forsvinner. I FlexiApp kan man selv velge tekst som skal vises og hvordan varslingen skal meldes.

Kontakt-kilder

Sengesensor eller stolsensor kobles til signalinngangen ⑥.

Montering

SENG10 monteres normalt på vegg med den medfølgende borrelås-tapen. Benytt den medfølgende spritservietten for å rengjøre vegg. Trykk limflatene hardt på plass i minst 10 sekunder.

Alternativt kan enheten festes med skrue til vegg gjennom festehullet under batteriet.



Forsiktig

Vær forsiktig når du skrur inn skruen slik at den omkringliggende hvite platen ikke skades.

Sette inn batteriet

Sett inn batteriets kontakt som vist i figuren til høyre. Ved tilkobling av batteri kan SENG10 blinke grønt i opptil et par minutter mens batteriet klargjøres for lang tids bruk.



Før ledningen i en bue inn i åpningen og legg inn batteriet.



Tips

Skriv inn dato på batteri-lappen i lokket når batteriet ble koblet til.



Tips

Trykk på test-knappen for å verifisere at enheten fungerer og at det varsler i mottakerne som tilsiktet.



Viktig

Hvis SENG10 skal tidsstyres med timer på batterieliminatoren, må IKKE batteriet settes inn!

4. I bruk

Når man setter/legger seg på senge/stolmatta, vil et grønt lys på senderen tennes. Når lyset starter å blinke, er alarmen aktivert. Dette grønne blinkende lyset indikerer at matta er i orden og er riktig plassert i seng/stol i forhold til brukeren. Når brukeren reiser seg fra seng/stol, vil SENG10 varsle etter innstilt tid (Se kap. 7 ID-tabell). Når enheten er i drift, vises status i lysindikatoren på framsiden:

<i>Blinkende grønt</i>	Aktivert
<i>Slukket</i>	Stand-by
<i>Grønt</i>	Varsel sendes / Sender startes

<i>Blinkende rødt/grønt</i>	Bytt batteri
---------------------------------	--------------

5. Viktig informasjon

- Produktet kan rengjøres med en myk, lett fuktet klut.
- Produktet er for innendørs bruk.
- Produktet vil varsle til mottakerne om behov for batteribytte hvis du har mottakere som viser dette.

Resirkulering

Produktet og batteriet skal ikke kastes sammen med restavfall.



Gjør deg kjent med lokale bestemmelser for avfallsdeponering av elektriske produkter.

Ved riktig håndtering vil store deler av produktet kunne resirkuleres, samtidig som du skåner miljøet.



Forsiktig

Batteriet må ikke punkteres, kortsluttes eller brennes.

6. Tekniske data

Dim. (bxhxd): 69x133x27mm
Vekt m/ batteri: 140 g
Batteri: Litium 3 V
Sendereffekt: 10 mW e.r.p.
Temperatur: -10 °C - +40 °C

Radiofrekvens: 142,475 MHz
Bruksbegrensninger:



Kun tillatt benyttet i Norge

7. Sikkerhet

Unngå å eksponere enheten for flammer og andre direkte varmekilder. Produktet må ikke kortsluttes eller skrus fra hverandre.

Brukerinnstillingene finnes ved å åpne lokket.

Batteriet må ikke punkteres, kortsluttes, brennes eller lades opp.

8. Samsvarserklæring

Vestfold Audio AS erklærer at produktet er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

Samsvarserklæringen i fulltekst er tilgjengelig på følgende

internettadresse:

www.vestfoldaudio.no/samsvar

9. ID-tabellen – velg varslingstype

ID	Funksjon	Tidsforsinkelse	Kommentar
0	Vandring inne	0 min	For stol
1	Vandring inne	0 min	For seng/stol
2	Vandring inne	1 min	For seng/stol
3	Vandring inne	3 min	For seng/stol
4	Vandring inne	6 min	For seng/stol
5	Vandring inne	10 min	For seng/stol
6	Vandring inne	15 min	For seng/stol
7	Vandring inne	30 min	For seng/stol
8	Vandring inne	45 min	For seng/stol
9	Vandring inne	60 min	For seng/stol
A	Det er natt – Gå til sengs	0 min	For seng/stol
B	Det er natt – Gå til sengs	15 min	For seng/stol
C	Sykesignal 1	0 min	For seng/stol
D	Sykesignal 2	0 min	For seng/stol
E	Varsel til IRIS Touch/AppSender (kode 410/411)	0 min	For stol
F	Varsel til IRIS Touch/AppSender (kode 412/413)	0 min	For seng/stol

10. Feilsøking

Problem	Mulig årsak	Løsninger
Det varsler ikke i mottakere	SENG10 får ikke signal fra kilden / det lyser ikke grønt.	Trykk på Testknappen og sjekk om varselet kommer fram.
	Tilkoblingen til signalkilden feiler	Kontroller tilkobling til signalkilden
	Batteriet i SENG10 er tomt / det blinker rødt.	Bytt batteri.
	SENG10 mangler batteri eller batterieliminatort er ikke montert	Sett inn batteri og/eller sett inn batterieliminatoren.
	Avstanden mellom SENG10 og mottaker er for stor.	Flytt enhetene nærmere hverandre eller sett inn en repeater.
Senderen blinker ikke grønt når bruker er i stol/seng	Seng/stolmatte er feil plassert	Juster matta i forhold til brukeren
	Seng/stolmatte er defekt	Bytt ut seng/stolmatte
Det lyser ikke grønt når signalet aktiveres.	SENG10 oppfatter ikke signalet.	Kontroller at kilden gir riktig signal til inngangen.
Det varsler med feil signal i mottakere.	Funksjonsvelger (ID) står i feil posisjon.	Skru funksjonsvelger til riktig posisjon.
Det blinker rødt/grønt i SENG10	Batteriet i SENG10 er snart tomt.	Bytt batteri

Hvis du har fått produktet på utlån fra NAV Hjelpemiddel-sentral, må du kontakte hjelpemiddelsentralen i fylket ditt ved behov for assistanse.

For å søke assistanse hos Vestfold Audio AS kan du sende en epost til post@vestfoldaudio.no eller ringe oss på telefon nr. 33 47 33 47.



Vestfold Audio AS
Nordre Fokserød 12, 3241 Sandefjord
www.vestfoldaudio.no
tel. +47 33 47 33 47

