

Sengevakt m/ strømforsyning

SENG10-L



Brukerhåndbok

Innholdsfortegnelse

<u>1. Innledning</u>	3
<u>2. Oversikt</u>	3
Utvendig	3
Under lokket	4
Batteriet	4
Batterieliminatort	4
<u>3. Komme i gang</u>	4
Sette inn batteriet	4
Sammenkoble enheter	4
Sammenkoble første gang	5
Sammenkobling av ny enhet til eksisterende system	5
Sammenkobling mislykkes	5
Avbryte sammenkobling	5
Montering	6
Tilkobling av matte	6
<u>4. I daglig bruk</u>	6
Lysdiodene	6
Velg funksjon (ID-velger)	6
<u>5. Viktig informasjon</u>	6
Bruksbegrensninger:	6
<u>6. Tekniske data</u>	7
<u>7. Resirkulering</u>	7
<u>8. Sikkerhet</u>	7
<u>9. Samsvarserklæring</u>	7
<u>10. Feilsøking</u>	8

1. Innledning

Universalsender SENG10-L er et produkt i FlexiBlink LIFE-serien. Den tilkobles utstyr som skal viderevarsle signaler til FlexiBlink LIFE mottakere.


Varsling blir utløst når en av inngangene aktiveres fra tilkoblet utstyr. Du kan ha så mange varslingsmottakere og sendere som du trenger for sikkerhet og dagligliv.

Sengevakt SENG10 benyttes sammen med en senge- eller stolsensor for å varsle aktivitet hos bruker. Sengevakten kan viderevarsle når bruker går ut av senga eller har et lengre fravær fra seng. Sengevakten kan også gi talepåminnelser til brukeren om natten.

SENG10 benytter vanligvis batterieliminatør og et spesialbatteri. Spesialbatteriet vil fungere som en backup ved et eventuelt strømbrudd. Selv om en ikke monterer batterieleiminatør, vil spesialbatteriet gi flere års levetid selv ved daglig bruk.


2. Oversikt

Utvendig

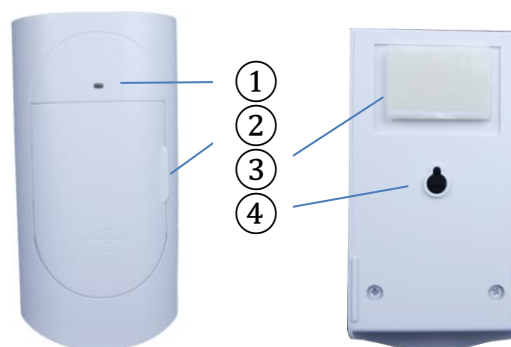

Figur 1 Framside


Figur 2 Bakside

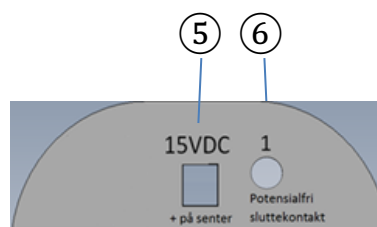

Figur 3 Bunn med 3,5mm jack-tilkobling og strømkontakt

- ① Lysindikator
- ② Løkk
- ③ Borrelås-tape
- ④ Hull for skruefeste
- ⑤ Tilkobling av medfølgende strømforsyning/ batterieliminatør.
- ⑥ Signalinngang for sengematte eller stolmatte.

Under lokket

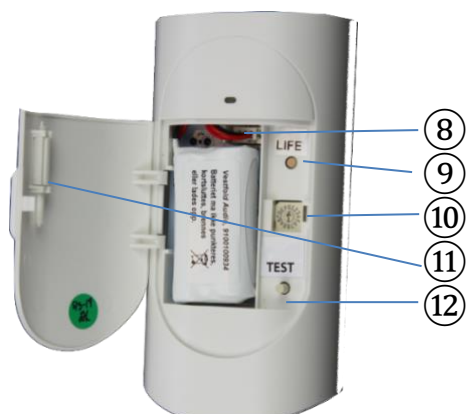

Figur 4 Under lokket

- ⑧ Batterikontakt
- ⑨ LIFE-knapp (sammenkobling)
- ⑩ Funksjonsvelger (ID-velger)
- ⑪ Verktøy for innstillinger
- ⑫ Testknapp

Batteriet

Det medfølger et høykapasitets litium-batteri (Varenr. 9100100934), som vil sikre drift av enheten hvis strømmen går eller dersom strømtilkobling ikke er praktisk mulig.



Batteriet må ikke lades opp.

Batterieliminatør

Den medfølgende batterieliminatøren kobles til kontakten ⑤ i bunnen av SENG10-L.

Dersom SENG10-L skal tidsstyres (på/av til faste tider i døgnet), benyttes en timer mellom kontakten i veggen og batterieliminatøren.

Da må IKKE batteriet settes inn!

3. Komme i gang

Sette inn batteriet

Sett inn batteriets kontakt som vist i figuren til høyre.

Ved tilkobling av batteri kan SENG10-L

blinke grønt i opptil et par minutter mens batteriet klargjøres for lang tids bruk.

Før ledningen i en bue inn i åpningen og legg inn batteriet.



Forsiktig

Batteriet må ikke punkteres, kortsluttes eller brennes.


Sammenkoble enheter

Alle FlexiBlink LIFE enheter som skal fungere sammen, må sammenkobles ved å trykke på LIFE-knappen.


Den finnes under lokket foran på SENG10-L. Se figur 4.

Sammenkoble første gang


1. Trykk **to** ganger på LIFE-knappen på en av enhetene.

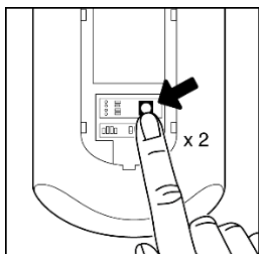

2. Trykk **én** gang på LIFE-knappen på den andre enheten.

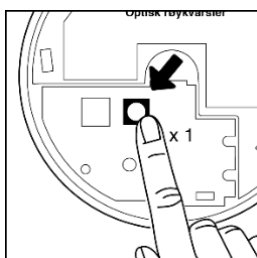

3. Indikatorlampene på begge enhetene blinker grønt.

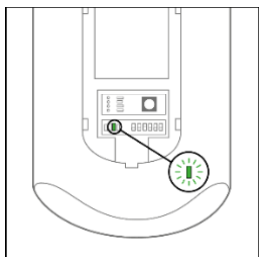

4. Sammenkoblingen bekreftes ved at indikatorlampene lyser fast grønt i 2-3 sekunder.
5. Enhetene er klare til bruk.

Trykk på «Test»-knappen på en sender for å kontrollere sammenkoblingen.

Sammenkobling av ny enhet til eksisterende system

1. Trykk **to** ganger på LIFE-knappen på enhet i eksisterende system.
2. Trykk **én** gang på LIFE-knappen på den *nye* enheten.
3. Sammenkoblingen bekreftes ved at indikatorlampene lyser fast grønt i 2-3 sekunder.
4. Enhetene er klare til bruk.

Trykk på «Test»-knappen for å kontrollere sammenkoblingen.


Sammenkobling mislykkes

Dersom du får rødt lys i den nye enheten ved sammenkobling, mislykkes den.

Da må du nullstille enheten for å sammenkoble på nytt.

Avbryte sammenkobling

For å avbryte sammenkoblingen, trykk **én** gang på LIFE-knappen.

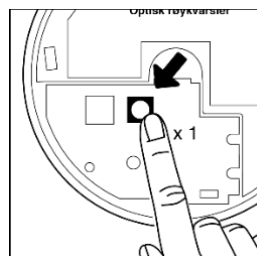

Montering

SENG10-L monteres normalt på sengegavlen med borrelås-tapen. Benytt den medfølgende spritservietten for å rengjøre veggen. Trykk limflatene hardt på plass i minst 10 sekunder. Alternativt kan enheten festes med skrue gjennom festehullet under batteriet.



Forsiktig

Vær forsiktig når du skrur inn skruen slik at den omkringliggende hvite platen ikke skades.

Tilkobling av matte

Sengematte eller stolmatte kobles til kontakten i bunnen av SENG10-L.



Viktig

Pass på at matten ligger slik at den oppfatter brukeren i sengen/stolen og at den reagerer raskt når den forlates.

4. I daglig bruk

Lysdiodene

Når enheten er i drift, vises status i lysindikatoren på framsiden:

<i>Blinkende grønt</i>	Aktivert
<i>Slukket</i>	Stand-by
<i>Grønt</i>	Varsel sendes / Sender startes

Blinkende

rødt/grønt Bytt batteri

Når man setter/legger seg på senge-/stolmatte, vil et grønt lys på SENG10-L tennes. Når lyset starter å blinke, er alarmen aktivert. Dette grønne, blinkende lyset indikerer at matte er i orden og er riktig plassert i seng/stol i forhold til brukeren.

Når brukeren reiser seg fra seng/stol, vil SENG10-L varsle etter innstilt tid. Se kap. Velg Funksjon under.



Viktig

Når systemet er koblet opp, må man ALLTID teste at det varsles som tiltenkt når matten "forlates".

Velg funksjon (ID-velger)

Med Funksjonsvelgeren kan du innstille hvordan sengevakten skal fungere og hvilke varslingsmeldinger den skal sende til FlexiBlink LIFE varslingsmottakerne.



Funksjonsvelger
(fabrikkinnstilling)

Se tabellen på neste side.

5. Viktig informasjon

Produktet kan rengjøres med en myk, lett fuktet klut.

Produktet er for innendørs bruk i ikke-kondenserende miljø.

Produktet vil varsle til mottakerne om behov for batteribytte hvis du har mottakere som viser dette.

Bruksbegrensninger:

Kun tillatt benyttet innen EU/EØS.

ID	Funksjon/ Varslingsmelding	Lokasjon nr	Tids- forsinkelse (fravær)	Kommentar
0	Vandring inne		0 min	For stol
1	Vandring inne	1	0 min	For seng/stol
2	Vandring inne	2	0 min	For seng/stol
3	Vandring inne	3	0 min	For seng/stol
4	Vandring inne	4	0 min	For seng/stol
5	Vandring inne	5	0 min	For seng/stol
6	Vandring inne	6	0 min	For seng/stol
7	Vandring inne		15 min	For seng/stol
8	Vandring inne		30 min	For seng/stol
9	Vandring inne		60 min	For seng/stol
A	Det er natt – Gå til sengs		0 min	For seng/stol
B	Det er natt – Gå til sengs		15 min	For seng/stol
C	Fravær fra seng		0 min	For seng/stol
D	Fravær fra seng		15 min	For seng/stol
E	Assistanse ønskes		0 min	For stol
F	Vandring inne		0 min	Stille varsling For seng/stol

6. Tekniske data

Dim. (bxhxd): 69x133x27mm
 Vekt m/ batteri: 140 g
 Batteri: Litium 3 V
 Sendereffekt: 10 mW e.r.p.
 Temperatur: -10 °C - +40 °C
 Radiofrekvens: 868.1–869.85
 MHz

7. Resirkulering

Produktet og batteriet skal ikke kastes sammen med restavfall.

Gjør deg kjent med lokale bestemmelser for avfallsdeponering av elektriske produkter.



8. Sikkerhet

Unngå å eksponere enheten for flammer og andre direkte varmekilder.
 Produktet må ikke skrues fra hverandre. Brukerinnstillingene finnes ved å åpne lokket.
 Batteriet må ikke punkteres, kortsluttes, brennes eller lades opp.

9. Samsvarserklæring

Vestfold Audio AS erklærer at produktet er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.
 Samsvarserklæringen i fulltekst er tilgjengelig på følgende internettadresse:
www.vestfoldaudio.no/samsvar

10. Feilsøking

Problem	Mulig årsak	Løsninger
Det varsler ikke i mottakere	SENG10-L får ikke signal fra matten / det lyser ikke grønt.	Trykk på Testknappen og sjekk om varselet kommer fram.
	Enhetene er ikke sammenkoblet.	Utfør sammenkobling.
	Matten oppfatter ikke at bruker har reist seg.	Sjekk om matten er skadet
	Avstanden mellom SENG10-L og mottaker er for stor.	Flytt enhetene nærmere hverandre eller sett inn en repeater.
	Matten ligger ikke riktig / oppfatter ikke at bruker er tilstede.	Legg matten slik at den aktiveres.
	Matten er ikke korrekt tilkoblet	Kontroller tilkobling.
Sammenkobling fungerer ikke	Begge enhetene har vært sammenkoblet tidligere. Det blinker rødt.	Trykk 5 ganger på LIFE-knappen på den enheten som skal legges til.
Det varsler med feil signal i mottakere.	Funksjonsvelger (ID) står i feil posisjon.	Skru funksjonsvelger til riktig posisjon.
Etter TEST-trykk, lyser senderen lenge rødt	Enheten er ikke sammenkoblet med noen	Koble enheten til en mottaker
Etter TEST-trykk, lyser senderen lenge grønt, deretter lenge oransje	Ingen mottaker er sammenkoblet senderen	Sjekk at det er en mottaker i systemet. Nullstill enheten. Koble til på nytt. Prøv igjen
Det blinker rødt/grønt i SENG10-L	Batteriet i SENG10-L er snart tomt.	Bytt batteri
SENG10-L virker selv om timer i kontakten slår av.	Det står batteri i SENG10-L.	Ta ut batteriet.

Hvis du har fått produktet på utlån fra NAV Hjelpemiddel-sentral, må du kontakte hjelpemiddelsentralen i fylket ditt ved behov for assistanse.

For å søke assistanse hos Vestfold Audio AS kan du sende en epost til post@vestfoldaudio.no eller ringe oss på telefon nr. 33 47 33 47.



Vestfold Audio AS
Nordre Fokserød 12, 3241 Sandefjord
www.vestfoldaudio.no
tel. +47 33 47 33 47

