

# Ella Smykkesender ELLA-L



## Brukerhåndbok

# 1. Innholdsfortegnelse

<b>2. Innledning</b>	<b>3</b>
<b>3. Oversikt</b>	<b>3</b>
<i>I pakken</i>	3
<b>4. Komme i gang</b>	<b>4</b>
<i>Lading</i>	4
<i>Sette inn ELLA</i>	4
<i>Ta ut ELLA</i>	4
<i>Sikkerhetssnoren</i>	4
<i>Lysdiodene og vibrasjoner</i>	4
<i>Sammenkoble enheter</i>	5
<i>Sammenkobling</i>	5
<i>Benytte ELLA for å sammenkoble en ny enhet til systemet</i>	5
<i>Sammenkobling mislykkes</i>	5
<i>Avbryte sammenkobling</i>	6
<i>Nullstille sammenkoblingen</i>	6
<i>Fabrikkinnstilling</i>	6
<i>Velg funksjon (ID-velger)</i>	6
<i>Forlenge rekkevidden</i>	6
<b>5. Daglig bruk</b>	<b>7</b>
<i>Sende et varsel</i>	7
<b>6. Viktig informasjon</b>	<b>7</b>
<i>Bruksbegrensninger:</i>	7
<b>7. Resirkulering</b>	<b>7</b>
<b>8. Tekniske data</b>	<b>7</b>
<b>9. Feilsøking</b>	<b>8</b>

## 2. Innledning

Smykkesenderen ELLA-L (ELLA) er en assistansealarm for personer som har behov for å kunne tilkalle assistanse eller sende varslinger til andre. Den bæres i halssnor.

ELLA sender varsling til ELLA og FlexiBlink LIFE mottakere.

ELLA kan også tilpasses for å starte fjernstyrt opplasing av klokke på produktene IRIS LIFE, MÅNE LIFE og SOL LIFE, og for en rekke andre varslinger.

ELLA vil vibrere når den sender varslinger.

### Nøkkeldata


- Enkel installasjon og bruk.
- Sprutsikker (dusj - ikke bad)
- Signalrekkevidde innen normal husstand
- Veldig god batterilevetid
- Oppladbar

## 3. Oversikt

### I pakken



Figur 1  
ELLA, armbånd, holder med sikkerhetssnor, lader og ladekabel

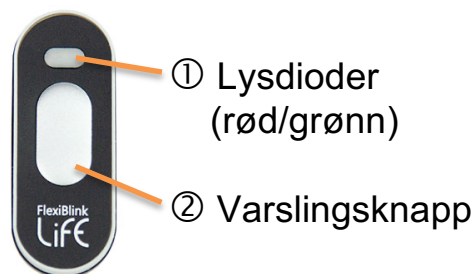

Figur 2 Knapp og lys

## 4. Komme i gang

### Lading

Før du begynner å bruke ELLA, bør den lades helt opp.

En fullt oppladet enhet har batterilevetid på uker avhengig av bruken.

Press ELLA ut av holderen og sett den inn i ladekontakten, som igjen settes inn i den medfølgende laderen.



Lysdioden blinker rødt så lenge ladingen pågår.

**NB!** Du kan ikke sende varslinger når enheten lades.

### Sette inn ELLA

ELLA settes inn i holderen "nedenfra" - altså trykkes ned mot bunnen først..



### Ta ut ELLA


ELLA tas ut ved å presse den opp gjennom holderen som vist på figuren over.

### Sikkerhetssnoren



Halssnoren til ELLA har sikkerhetsfester i form av små metallkuler som passer inn i hullene i holderen. Hvis snoren trekkes ut, er det bare å dytte kulene på plass igjen.

### Lysdiodene og vibrasjoner

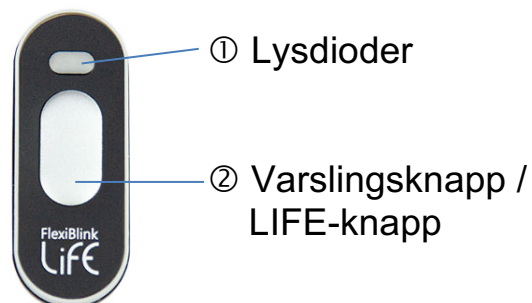

ELLA har to lysdioder, en grønn og en rød, og en vibrator som sammen gir informasjon:

Grønn blink + vibrasjon	Sender varsel
Grønt lys etter sending	Sendt varsel er mottatt
Rød blink+ 10 x vibrasjon	Varslingen kom ikke fram.

Rød og grønn blink	Lavt batteri.
Rød blink	Enheten lades

## Sammenkoble enheter

Alle FlexiBlink LIFE enheter som skal fungere sammen, må sammenkobles med noen enkle knappetrykk.

## Sammenkobling

Et system kan bestå av en eller flere sendere og mottakere som er sammenkoblet.

Alle FlexiBlink LIFE enheter har en LIFE-knapp som benyttes under sammenkobling. LIFE-knappen finner du som regel på baksiden, eller under lokket på produktet. Detaljert informasjon finner du i brukermanualen til det produktet du skal benytte.

ELLA Smykkesender følger en litt annen prosedyre. Den har ingen egen LIFE-knapp, men benytter alarmknappen for sammenkobling.

1. Finn LIFE-knappen på enheten du skal sammenkoble ELLA til, som f.eks. en Junior Lommevibrator.
2. Trykk og hold alarmknappen på ELLA i ca 10 sekunder til den kvitterer med 3 korte vibrasjoner.
3. Trykk 2 ganger på alarmknappen på ELLA. Indikatorlampen blinker grønt.
4. Trykk 1 gang på LIFE-knappen på enheten du skal

sammenkoble med.  
Indikatorlampen blinker grønt.

5. Sammenkoblingen bekreftes ved at begge indikatorlampene lyser fast grønt i 2-3 sekunder.

## Benytte ELLA for å sammenkoble en ny enhet til systemet

Når ELLA er med i et system, kan den benyttes til å koble sammen flere sendere eller mottakere.

1. Hold varslingsknappen på ELLA inne i ca. 10 sekunder. ELLA kvitterer med 3 korte vibrasjoner.
2. Trykk **to** ganger på varslingsknappen på ELLA. Indikatorlampen på ELLA blinker da grønt.
3. Trykk **én** gang på LIFE-knappen på enheten som skal kobles til ELLA. Indikatorlampen på denne enheten blinker grønt.
4. Sammenkoblingen bekreftes ved at begge indikatorlampene lyser fast grønt i 2-3 sekunder.

## Sammenkobling mislykkes

Hvis enheten lyser rødt under sammenkoblingen, er koblingen mislykket.

Sammenkoblingen må nullstilles for å sammenkoble på nytt.

## Avbryte sammenkobling

For å avbryte sammenkoblingen, trykk **én** gang på LIFE-knappen / varslingsknappen på ELLA.

## Nullstille sammenkoblingen

1. Trykk og hold varslingsknappen inne i 10 sekunder, inntil du kjenner 3 vibrasjoner.
2. Trykk **fem** ganger på varslingsknappen på ELLA.
3. Nullstilling bekreftes med røde og grønne blink.

## Fabrikkinnstilling

For å slette spesialtilpasning av ELLA, må først sammenkoblingen nullstilles. Deretter kan den fabrikkinnstilles.

1. Trykk og hold varslingsknappen inne i 10 sekunder, inntil du kjenner 3 vibrasjoner.
2. Trykk **ti** ganger på varslingsknappen på ELLA.
3. Nullstilling bekreftes med røde og grønne blink.

## Velg funksjon (ID-velger)

ELLA kan settes opp til å sende andre varslinger enn "Assistanse ønskes".

Dette må gjøres ved hjelp av en IRIS LIFE varslingsmottaker.

Vennligst se brukerhåndboken til IRIS LIFE. Dette kan også bestilles ferdig satt opp fra Vestfold Audio AS.

## Forleng rekkevidden

I større bygg eller institusjoner hvor man har behov å forleng rekkevidden mellom en ELLA og andre FlexiBlink LIFE produkter, må det benyttes en eller flere videresendere av typen REPEATER-L.

## 5. Daglig bruk

---

### Sende et varsel

Når du trykker på varslingsknappen, sendes varsel til alle mottakere som er sammenkoblet din ELLA. Det lyser grønt og gis en vibrasjon på at varslingen er sendt.

Standard varslingsmelding er: "Assistanse ønskes!"

**NB!** Hvis det blinker rødt og vibreres 10 ganger tett, betyr det at ingen mottakere har oppfattet varslingen. Om mulig, flytt deg og prøv på nytt!

## 6. Viktig informasjon

---

Produktet kan rengjøres med en myk, lett fuktet klut.

Produktet er for innendørs bruk i ikke-kondenserende miljø.

Produktet vil varsle til mottakerne om behov for batteribytte hvis du har mottakere som viser dette.

### Bruksbegrensninger:

Kun tillatt benyttet innen EU/EØS.

## 7. Resirkulering

---

Produktet og batteriet skal ikke kastes sammen med restavfall.



Gjør deg kjent med lokale bestemmelser for avfallsdeponering av elektriske produkter.

Ved riktig håndtering vil store deler av produktet kunne resirkuleres, samtidig som du skåner miljøet.

## 8. Tekniske data

---

Dim. (lxb): 235x10mm

Vekt m/ batteri: 40 g

Radiofrekvens: 868.1–869.85 MHz

Sendereffekt: 10 mW e.r.p.

Temperatur: -10 °C - +40 °C

Ladespenning: 5VDC (USB)

## 9. Feilsøking

Problem	Mulig årsak	Løsninger
Det varsles ikke i mottakere	Avstanden mellom ELLA og mottaker er for stor.	Flytt enhetene nærmere hverandre eller sett inn en repeater.
	ELLA er tom for strøm.	Lad opp ELLA.
	ELLA og mottakere er ikke sammenkoblet.	Utfør sammenkobling. Se kap. 3
	Feil på mottaker	Se bruksanvisning for mottakeren.
Sammenkobling fungerer ikke	Begge enhetene har vært sammenkoblet tidligere. Det blinker rødt.	Nullstill sammenkobling. Se kap. 3
Det lyser ikke grønt når knappen trykkes.	ELLA er tom for strøm.	Lad opp ELLA.
Det blinker rødt/grønt	ELLA er nesten tom for strøm.	Lad opp ELLA.
Det varsles med feil signal i mottakere.	ELLA er satt til å sende et "feil" varsel.	Bruk en IRIS LIFE for å sette riktig varsling i ELLA. Se brukerhåndbok for IRIS.
Det blinker rødt og vibrerer etter at knappen er trykket og etter at grønt lys for sending har slukket.	Varslingen ble ikke mottatt av noen mottakere.	Flytt enhetene nærmere hverandre eller sett inn en repeater
		Utfør sammenkobling med mottakere.
Sletting av sammenkøling fjerner spesialtilpasning	ELLA er av tidligere versjon.	Spesialtilpass på nytt



Vestfold Audio AS

[www.vestfoldaudio.no](http://www.vestfoldaudio.no)

tel. 33 47 33 47

