




Sengevaktsender (SENG10 Care)

Bruksanvisning



Art.: 1880

SENG10 CARE benyttes sammen med en senge- eller stolsensor for å varsle aktivitet hos bruker. Sengevakten kan viderevarsle når bruker går ut av seng/stol heller har et lengre fravær fra seng/stol. Sengevakten kan også gi talepåminnelser til brukeren om natten.

	<p>Lysindikator</p> <p>Lokk</p>
	<p>Batterikontakt</p> <p>LIFE-knapp</p> <p>Funksjonsvelger (ID-velger)</p> <p>Testknapp</p>
	<p>Signalinngang for sengematte eller stolmatte</p> <p>Tilkobling for batterieliminatør 15VDC</p>

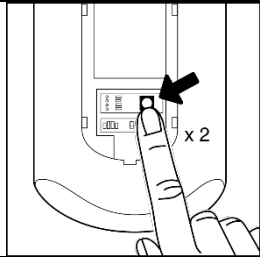
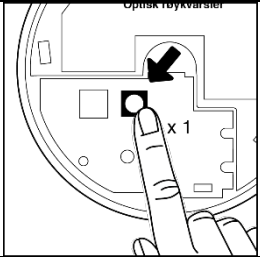
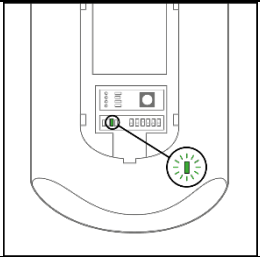
BATTERI OG BATTERIELIMINATOR

SENG10 benytter vanligvis batterieliminatør og spesialbatteri. Spesialbatteriet vil fungere som en backup ved et eventuelt strømbrudd. Selv om en ikke monterer batterieliminatør, vil spesialbatteriet gi flere års levetid ved daglig bruk.

Batterieliminatøren kobles til kontakten i bunnen av SENG10. Dersom SENG10 skal tidsstyres (på/av til faste tider i døgnet), benyttes en timer mellom kontakten i veggen og batterieliminatøren. Da må IKKE batteriet settes inn.

SAMMENKOBLING FØRSTE GANG

Alle FlexiBlink LIFE enheter som skal fungere sammen, må sammenkobles ved å trykke på LIFE-knappen. Den finnes under lokket.

		
<p>1. Trykk 2 ganger på LIFE-knappen på den ene av enhetene.</p>	<p>2. Trykk 1 gang på LIFE-knappen på den andre enheten. Indikatorlampene på begge enhetene blinker grønt.</p>	<p>3. Sammenkoblingen bekreftes ved at indikatorlampene lyser fast i 2-3 sekunder. Enhetene er klare til bruk. Trykk «Test»-knappen på en sender for å kontrollere sammenkoblingen.</p>

SAMMENKOBLING AV NY ENHET TIL EKSISTERENDE SYSTEM

1. Trykk 2 ganger på LIFE-knappen på enhet fra eksisterende system.
2. Trykk 1 gang på LIFE-knappen på den nye enheten.
3. Sammenkoblingen bekreftes ved at indikatorlampene lyser fast grønt i 2-3 sekunder.
4. Enhetene er klare til bruk. Trykk «Test»-knappen for å kontrollere sammenkoblingen.

SAMMENKOBLING MISLYKTES

Dersom du får rødt lys i den nye enheten ved sammenkobling, mislyktes den.

Nullstill enheten for å sammenkoble på nytt. (Se nedenfor).

AVBRYTE SAMMENKOBLING

For å avbryte en aktiv sammenkobling, trykk 1 gang på LIFE-knappen.

NULLSTILLE SAMMENKOBLINGEN

Trykk 5 ganger på LIFE-knappen på enheten hvor sammenkoblingen skal slettes. Dette bekreftes med røde og grønne blink. Dersom du ønsker å endre funksjoner i produktet, se avsnitt «Utvidede funksjoner».

MONTERING

SENG10 monteres normalt på sengegavlen med borrelås-tapen. Benytt den medfølgende spritservietten for å rengjøre vegg. Trykk limflatene hardt på plass i minst 10 sekunder. Alternativt kan enheten festes med skruer gjennom festehullet under batteriet.

TILKOBLING AV MATTE

Sengematte eller stolmatte kobles til kontakten (2) i bunnen av SENG10.

NB! Pass på at matten ligger slik at den oppfatter brukeren i sengen/stolen og at den reagerer raskt når den forlates.

DAGLIG BRUK

Når man setter/legger seg på senge-/stolmatta, vil et grønt lys på SENG10 tennes. Når lyset starter å blinke, er alarmen aktivert. Dette grønne, blinkende lyset indikerer at matta er i orden og er riktig plassert i seng/stol i forhold til brukeren. Når brukeren reiser seg fra seng/stol, vil SENG10 varsle etter innstilt tid.

I BRUK

Når enheten er i drift, vises status i lysindikatoren på fremsiden:

Slukket	Stand-by
Grønt	Varsel sendes
Blinkende rødt/grønt	Bytt batteri

VELG FUNKSJON (ID-VELGER)

SENG10 CARE har innebygget flere ferdigprogrammerte varslinger. Velg varslings-ID ved å vri på funksjonsvelgeren, som du finner under lokket på framsiden. Varslingene kan ytterligere spesialtilpasses i varslingsmottakeren IRIS CARE eller via vår Skytjeneste.

ID	VARSEL	ID	VARSEL
0	Vandring inne 1	8	Vandring inne 8
1	Vandring inne 1	9	Vandring inne 9
2	Vandring inne 2	A	Vandring inne 10
3	Vandring inne 3	B	Vandring inne 11
4	Vandring inne 4	C	Vandring inne 12
5	Vandring inne 5	D	Vandring inne 13
6	Vandring inne 6	E	Vandring inne 14
7	Vandring inne 7	F	Vandring inne 15

VIKTIG INFORMASJON:

Produktet kan rengjøres med en myk, lett fuktet klut. Produktet er for innendørs bruk i ikke-kondenserende miljø.

Produktet vil varsle til mottakerne om behov for batteribytte hvis du har mottakere som viser dette. Produktet bør ikke stå i direkte sollys.

BRUKSBEGRENSNINGER

Kun tillatt benyttet innen EU/EØS.

RESIRKULERING

Produktet skal ikke kastes sammen med restavfall. Gjør deg kjent med lokale bestemmelser for avfallsdeponering av elektriske produkter. Ved riktig håndtering vil store deler av produktet kunne resirkuleres, samtidig som du skåner miljøet.

SIKKERHET

Unngå å eksponere enheten for flammer og andre direkte varmekilder. Produktet må ikke skrues fra hverandre.

TEKNISKE DATA

Dim. (bxhxd):	69x133x27mm	Sendereffekt:	10 mW e.r.p.
Vekt m/ batteri	140 g	Batteri:	Litium 3V
Radiofrekvens:	868.1 – 869.85 MHz	Temperatur:	-10 °C - +40 °C

SAMSVARSERKLÆRING

Vestfold Audio AS erklærer at produktet er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

Samsvarserklæringen i fulltekst er tilgjengelig på følgende internettadresse:

www.vestfoldaudio.no/samsvar

FEILSØKING

Problem	Mulig årsak	Løsninger
Det varsler ikke i mottakere	SENG10 får ikke signal fra kilden / det lyser ikke grønt.	Trykk på Testknappen og sjekk om varselet kommer fram.
	Enhetene er ikke sammenkoblet.	Utfør sammenkobling.
	Signalet er ikke godt	Sjekk tilkoblet signal
	Avstanden mellom SENG10 og mottaker er for stor.	Flytt enhetene nærmere hverandre eller sett inn en repeater.
	Batteriet i SENG10 er tomt / det blinker rødt.	Bytt batteri.
	SENG10 mangler batteri	Sett inn batteri.
	Kontakten er ikke korrekt tilkoblet	Kontroller at sensoren er tilkoblet rett inngang.
Sammenkobling fungerer ikke	Begge enhetene har vært sammenkoblet tidligere. Det blinker rødt.	Trykk 5 ganger på LIFE-knappen på den enheten som skal legges til.
	Batteriet i SENG10 er snart tomt.	Bytt batteri
Det varsler med feil signal i mottakere.	Funksjonsvelger (ID) står i feil posisjon.	Skru funksjonsvelger til riktig posisjon.
Etter TEST-trykk, lyser senderen rødt	Enheten er ikke sammenkoblet	Koble enheten til en mottaker
Etter TEST-trykk, lyser senderen lenge grønt, deretter lenge oransje	Ingen mottaker er sammenkoblet med senderen	Sjekk at det er en mottaker i systemet. Nullstill enheten. Koble til på nytt. Prøv igjen
Det blinker rødt/grønt i SENG10	Batteriet i SENG10 er snart tomt.	Bytt batteri
SENG10 virker selv om timer i kontakten slår av.	Det står batteri i SENG10	Ta ut batteriet.

