

Tidsstyrt Aktivitetsvarsler (Aktiv Care)



Bruksanvisning



Art.: 1752

AKTIV CARE varsler hendelser i valgte tidsrom og med en gitt varighet. Den benyttes sammen med mattesensor, passasjesensor eller magnetbryter. Ved aktivitet sendes alarmene trådløst til CARE mottakere. Man kan benytte flere AKTIV CARE i ett system. Mottakerne vil vise med unik ID hvilken enhet varslingen er sendt fra.

Tilgjengelige mottakere er IRIS CARE (varenr.: 1716) og JUNIOR LOMMEVIBRATOR CARE (varenr.: 1744). Varslingen kan også sendes via app til Android og iPhone telefoner.

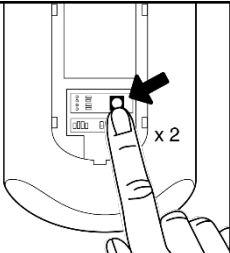
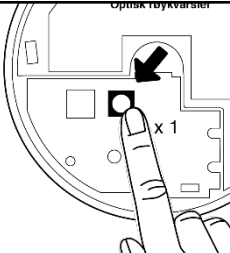
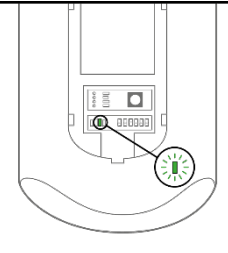
	<p>Touch-skjerm</p> <p>Life-knapp</p> <p>Funksjonsvelger</p>
	<p>Tilkobling strømforsyning (Opsjon. Kjøpes separat)</p> <p>Tilkoblingspunkt for sensor (PIR Gardin, Dørkontakt)</p>

BATTERI

Enheten drives av 2 Litium AA-batterier.

SAMMENKOBLING FØRSTE GANG

Alle FlexiBlink LIFE enheter som skal fungere sammen, må sammenkobles ved å trykke på LIFE-knappen. Den finnes under lokket.

		
<p>1. Trykk 2 ganger på LIFE-knappen på den ene av enhetene.</p>	<p>2. Trykk 1 gang på LIFE-knappen på den andre enheten. Indikatorlampene på begge enhetene blinker grønt.</p>	<p>3. Sammenkoblingen bekreftes ved at indikatorlampene lyser fast i 2-3 sekunder. Enhetene er klare til bruk. Trykk «Test»-knappen på en sender for å kontrollere sammenkoblingen.</p>

SAMMENKOBLING AV NY ENHET TIL EKSISTERENDE SYSTEM

1. Trykk 2 ganger på LIFE-knappen på enhet fra eksisterende system.
2. Trykk 1 gang på LIFE-knappen på den nye enheten.
3. Sammenkoblingen bekreftes ved at indikatorlampene lyser fast grønt i 2-3 sekunder.
4. Enhetene er klare til bruk. Trykk «Test»-knappen for å kontrollere sammenkoblingen.

SAMMENKOBLING MISLYKTES

Dersom du får rødt lys i den nye enheten ved sammenkobling, mislyktes den.

Nullstill enheten for å sammenkoble på nytt. (Se nedenfor).

AVBRYTE SAMMENKOBLING

For å avbryte en aktiv sammenkobling, trykk 1 gang på LIFE-knappen.

NULLSTILLE SAMMENKOBLINGEN

Trykk 5 ganger på LIFE-knappen på enheten hvor sammenkoblingen skal slettes. Dette bekreftes med røde og grønne blink. Dersom du ønsker å endre funksjoner i produktet, se avsnitt «Utvidede funksjoner».

MONTERING

Benytt medfølgende borrelås eller skruer. Hvis du skal bruke borrelåsen må flatene først rengjøres med den medfølgende spritservietten. Vent minst 1 minutt tørketid før montering.

KOBLE TIL EN SENSOR

AKTIV CARE kan benytte trykknapper, brytere, magnetkontakt på dør, senge- og stolmatter og bevegelsessensorer. Sensorene bestilles separat, og kobles til på baksiden av AKTIV CARE.

VARSLINGSFUNKSJONER

- 1: Varsling rom 1
- 2: Varsling rom 2
- 3: Varsling rom 3
- 4: Varsling rom 4
- 5: Varsling rom 5
- 6: Varsling rom 6
- 7: For sengematte: Vandring inne 1
- 8: For sengematte: Vandring inne 2
- 9: For sengematte: Vandring inne 3

VARSLINGSINNSTILLINGER

- 1: Åpne lokket på fremsiden. Nå vises gjeldende tidspunkt og dato.
- 2: Trykk «Innstillinger» for å slå PÅ eller AV varslingsfunksjonen.
- 3: Trykk «JA» for å slå PÅ varsling, samt for å endre/se varslingsfunksjon og oppsett.
- 4: Trykk «Neste» for å bla i varslingsfunksjonene, og trykk «Bekreft» for å velge.
- 5: Etter valgt funksjon velges tidsrommet funksjonen skal være aktiv.

Enkelte funksjoner (7,8 og 9) kan man sette at hendelsen skal vare en viss tid før varslingen sendes. Her kan tiden stilles inn. Dette fungerer kun dersom det benyttes en sensor som er

aktiv mens hendelsen pågår, som f.eks. sengesensor. Dersom hendelsen skal iverksettes straks hendelsen oppdages, settes tiden til 0 minutter.

6: Produktet aktiveres først når lokket settes på igjen.

AVANSERTE VALG

På brytterrekken (1-4) under lokket kan det gjøres en del ekstra innstillinger.

Varsling av fravær:

Ved bruk av sengevakt vil AKTIV CARE først aktiveres etter at brukeren har lagt seg i senga i aktiveringstidsrommet. Dersom det er ønskelig å varsle dersom bruker ikke har lagt seg, kan bryter 1 vippes opp.

Antall repetisjoner:

AKTIV CARE sender normalt alarm opp til 5 ganger etter hverandre dersom alarmsituasjonen er opprettholdt (f.eks. dør åpen). Ved å vippe bryter 2 opp vil den kun sende én gang selv om alarmen er opprettholdt.

Systeminnstillinger:

- Stille klokke
- Stille dato
- Kalibrere touch-skjermen
- Tilbakestille til fabrikkinnstilling

1: Vipp opp bryter 4.

2: Sett på og ta av lokket igjen for å komme til innstillingsmenyen.

3: Trykk «Innstilling» på skjermen og velg fra menyen.

4: Når du har justert ferdig vipper du bryter 4 ned.

5: Sett på lokket.

VIKTIG INFORMASJON:

Produktet kan rengjøres med en myk, lett fuktet klut. Produktet er for innendørs bruk i ikke-kondenserende miljø.

Produktet vil varsle til mottakerne om behov for batteribytte hvis du har mottakere som viser dette. Produktet bør ikke stå i direkte sollys.

BRUKSBEGRENSNINGER

Kun tillatt benyttet innen EU/EØS.

RESIRKULERING

Produktet skal ikke kastes sammen med restavfall. Gjør deg kjent med lokale bestemmelser for avfallsdeponering av elektriske produkter. Ved riktig håndtering vil store deler av produktet kunne resirkuleres, samtidig som du skåner miljøet.

SIKKERHET

Unngå å eksponere enheten for flammer og andre direkte varmekilder. Produktet må ikke skrues fra hverandre.

TEKNISKE DATA

Dim. (bxhxd):	95x150x40mm	Sendereffekt:	10 mW e.r.p.
Vekt m/ batteri	240 g	Batteri:	2xAA Lithium
Radiofrekvens:	868.1 – 869.85 MHz	Temperatur:	-10 °C - +40 °C

SAMSVARERKLÆRING

Vestfold Audio AS erklærer at produktet er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

Samsvarserklæringen i fulltekst er tilgjengelig på følgende internettadresse:

www.vestfoldaudio.no/samsvar

FEILSØKING

Problem	Mulig årsak	Løsninger
AKTIV Care aktiveres, men ingen respons i mottaker.	Ikke sammenkoblet med mottaker(e).	Koble sammen.
	Klokken er utenfor varslingsperioden(e).	Kontroller at klokken går riktig og at riktige varslings-tidspunkt er satt opp.
	Varslingen er slått AV.	Gå inn i innstillinger og aktiver varslingen.
	Det er for lang avstand mellom sender og mottaker.	Flytt enhetene nærmere eller benytt en FlexiBlink repeater/videresender.
Sammenkobling fungerer ikke	Begge enhetene har vært sammenkoblet tidligere. Det blinker rødt.	Trykk 5 ganger på LIFE-knappen på den enheten som skal legges til.
Etter TEST-trykk, lyser senderen lenge grønt, deretter lenge oransje	Ingen mottaker er sammenkoblet med senderen	Sjekk at det er en mottaker i systemet. Nullstill enheten. Koble til på nytt. Prøv igjen
Klokken viser feil tidspunkt eller dato		Still klokken / dato. Se kapittel SYSTEMINNSTILLINGER.
	Klokkebatteriet er tomt for strøm.	Kontakt leverandøren.
Hvordan tilbake stille innstillinger?		Se kapittel SYSTEMINNSTILLINGER.
Produktet varsler lavt batteri selv med helt nye batterier.	Forsinkelse i batterimåling.	Ta av frontlokket. Sjekk at det ikke står «Bytt batteri» på skjermen. Sett deretter lokket på igjen.
Berøring på skjerm registreres ikke	Touch må kalibreres	Se kapittel SYSTEMINNSTILLINGER.

